

# Hammasete valgendamine kõigile

**BLANCONE<sup>®</sup>**

Professionaalne hammasete valgendamine  
Esteetiline hambaravi



# BlancOne®: uus suund hammaste valgenduses

BlancOne®-i protseduurid on 15-aastase uurimistöö tulemus, mis on viinud uue lähenemisviisini hammaste valgendamises ning põhineb uue fotokeemilise tehnoloogia väljatöötamisel.

On tõestatud fakt, et valgendavate lampide poolt kiirgata valgus ei suurenda hammaste valgendamisel kasutatavate peroksiidide efektiivsust, see vaid kiirendab pisut reaktsiooni geelis, tänu ülekantavale soojusele.

BlancOne®-i fotokeemilised geelid sisaldavad lisaks peroksiidile kaht spetsiaalset komponenti, mis suudavad peroksiidi lagundada väga tõhusalt ja kiirelt, mida siiani traditsiooniliste valgendamissüsteemide keemiliste reaktsioonide abil ei ole saavutatud.

- FOTOSENSIBILISEERIJAD, spetsiaalsed värvained, mis kasutavad lambilt kiirguvalt kindlate lainepikkustega kiiratavoid footoneid ja saavutavad „ergastatud oleku“, edastades kogu süsteemile arvestatava koguse energiat.


- KATALÜSAATORID, mis sünteesivad selle energia ja käivitavad rea ahelreaktsioone, kiirendades peroksiidide lagunemist.

See „plahvatuslik“ energiamehhanism, „mis tekitab mõne minutiga tekitada teistsuguse hapniku: ÜHEVALENTSE HAPNIKU. See mitteradikaalne hapniku aatomvorm, mis on võimeline teostama palju kiiremini, sügavamalt ja ohutumalt oksüatsiooni, erinevalt vabast radikaalidest (ROS), mida toodavad traditsioonilised valgendamissüsteemid.



# BlancOne® CLICK: hammaste valgendamise protseduur, mis muudab hambavalgendust täielikult

Uuenduslik BlancOne tehnoloogia on võimaldanud välja töötada uue ja ainulaadse hammaste valgendamise meetodi BlancOne® CLICK, mis on kiire ning on võimalik teostada kohe peale hammaste süvapuhasust.

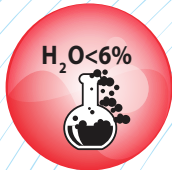

## Efektne madalatel kontsentratsioonidel

Esmakordselt oleme teinud hambaravikabinetis valgendamise tõhusaks isegi vesinikperoksiidi madalatel kontsentratsioonidel (<6%), mis on vastavuses tarbijate ohutuse tagamise kõige uuema Euroopa Liidu direktiiviga 84/2011.



## Ei ole vaja igemekaitsegeeli

Oleme töötanud välja hambaravikabinetis kasutatavad valgendusprotseduurid, mis ei nõua limaskestade kaitsmist, kaotades nii kõige keerulisema osa protseduurist, mida on lihtne ja ohutu läbi viia.



## Toimib vaid 10 minutiga

Tänu BlancOne®-i fotokeemilisele tehnoloogiale toimub tavaliselt tunni kestev 16% karbamiidperoksiidi lagunemine ülikiirelt, vaid mõne minutiga.

Protseduur on palju kiirem ja mugavam ning seda saab kombineerida teiste suuhügieeni protseduuridega (soodapuhastus, hambakivi eemaldus).



## Ei tekita valu ega tundlikkust

Tänu väga kiirele toimele ei ole ükski BlancOne®-i hambaravikabinetis läbiviidav protseduur agressiivne ega dehüdreeri hambaemali, ei tekita hammastel valu ega tundlikkust. Tegelikult on see turul olevatest toodetest ainuke, mis ei sisalda tundlikkust vähendavaid ja remineraliseerivaid toimeaineid.



## Taskukohane ja korratav

Tänu kiiretele protseduurile ja madalale hinnale saab BlancOne® CLICKi pakkuda kõigile taskukohase hinnaga. Ideaalne esmakordseks valgendamiseks, saab korrata regulaarselt, esimene ohutu valik hammaste valgendamisel





# Kõik algab

## CLICKiga

**BlancOne® CLICK on** uue kontseptsiooniga protseduur, mille tulemusel muutub hambavärvitoon kuni 5 tooni valgemaks. **Teenus on patsiendile** taskukohane ja **seanss on kiire**, kestab vaid 10 minutit ja seetõttu **IDEAALNE** lähtepunkt, et **kõik saaksid endale lubada koheselt valgemat ja säravamat naeratust.**

- ✓ IDEAALNE valgendamise alustamiseks
- ✓ IDEAALNE neile, kellel on piiratud eelarve
- ✓ IDEAALNE lõpetus igale hügieeniseansile
- ✓ IDEAALNE hambaravikabineti reklaamiturunduse jaoks

**Viimase aasta jooksul on ainuüksi Itaalias läbi viidud enam kui 100 000 valgendusprotseduuri ja patsientide rahuloluindeks on 4,5 punkti 5s, mistõttu on BlancOne® CLICKist saanud** hambaarstide ja patsientide valik nr.1 hambavalgenduses!



Nüüd  
saate pakkuda  
**kõigile patsientidele**  
valgemat ja säravamat  
**naeratust, pärast iga suuhügieenisti küllastust.**

Hammaste süvapuhas on hambaravikabinettide igapäevane protseduur; teie patsiendid ootavad, et hügieeniseansi järel oleks hambad valgemad, seetõttu ongi suuhügieeniseansi ideaalne võimalus selle soovi täitmiseks.

# Kuidas saavutada parim tulemus

## oma patsientide naeratuse heaks

Pärast BlancOne® CLICK valgendusprotseduuri saate näidata oma patsientidele, kuidas saavutada veelgi parem ja püsivam tulemus. Vastavalt patsiendi eelistustele ja võimalustele saate pakkuda neile 4 valikut:

### CLICK **Korrake**

**CLICKi** protseduuri korrata 3-6 kuu järel

BlancOne® CLICK on väga õrn protseduur, mida igaüks saab endale lubada ja mida võib ka sageli korrata. **Idealne osa igal suuhügieeniseansil.**



### TOUCH **Võimenda**

**Intensiivsem tulemus TOUCH protseduuriga**

BlancOne® TOUCH on CLICKi intensiivne versioon, **mille käigus kantakse valgendusgeeli peale 3-4 korral.**

Õrn ja tõhus valgendav protseduur, **mille tulemuseks on valgem ja püsivam hambatoon.**



### HOME **Kombineeri**

**Kodune protseduur HOME**

**Kombineeri** CLICKi tulemus täiuslikumaks ja stabiilsemaks kasutades koduseks kasutuseks kappeid koos geeliga. HOME on saadaval kahes versioonis: DAY (2 tundi) ja NIGHT (terve öö).



### XTRA **Säilita**

**Tulemuse säilitamine meie XTRA programmiga**

**BlancOne® XTRAt saab kombineerida kõikide valgendusprotseduuridega, et suurendada selle efektiivsust ja stabiilsust**

Kaks toodet koduseks kasutamiseks :

- geel-hambapastad DUETTO ACTIVE ja DUETTO CARE;
- valgendav pliiats BlancOne® STICK.

**Säilitusprogramm BlancOne® XTRA kestab kuni 3 kuud.**



### ULTRA **ULTRA**

Meditsiiniline valgendamine

Raskete juhtumite ja nõudlike patsientide jaoks **sisaldab BlancOne®** tootevalik fotokeemilise reaktsiooni toimel aktiveeruvat meditsiinilist preparaati ULTRA, 35% vesinikperoksiidiga.

**ULTRA on sobilik suureks värvimuutuseks, näiteks tetratsükliinist põhjustatud plekkide eemaldamiseks, eeldab igemekaitsevahendite kasutamist ning võimaldab läbi viia kuni 4 tsüklit ühe protseduuri käigus. Tõeliselt üllatavate tulemuste saavutamiseks.**



BlancOne® ULTRA on meditsiiniline protseduur (EL direktiiv 93/42). Mõnes ELi riigis võivad selle kasutamist piirata kohalikud reeglid.

HAMBARAVI KABINETIS

KODUS

# Fotoaktiveeriv lamp

## BlancOne® ARCUS

BlancOne®-i tehnoloogiline innovatsioon sai võimalikuks tänu eksklusiivsele lambile BlancOne® ARCUS, millel on mitmeid eeliseid:

- BlancOne® protseduuri tarvis on välja töötatud parima tulemuse saavutamiseks BlancOne® Arcus lamp;
- 10 võimsat 5 W LED-lampi tagavad parima efektiivsuse ja BlancOne®-i protokollides näidatud kiire toimeaja;
- lai kaar ja LED-lampide paigutus kuni servadeni tagavad geeli täieliku aktiveerimise kogu hambakaarel, kaasa arvatud ka külgedel.

BlancOne® ARCUS on saadaval kahes versioonis: mobiilne lamp, mis on ratastel ja hambaravitöökohale kinnitav lamp.



# BlancOne® PRO rakendus: võimas tööriist

## Täiustab professionaalset lähenemist igale protseduurile

- Lihtsalt ja kiirelt saate salvestada iga patsiendi\* andmeid ja harjumusi, mis võivad ravi tõhusust vähendada.
- Teil on võimalik lihtsalt ja kiirelt näidata, kui palju saab nende hamba tooni paremaks muuta.
- Tehes pildi enne ja pärast protseduure, saate kohe näidata teostatud ravi tulemust.
- Raviprotseduuri lõpus soovib rakendus, millal võtta plaani järelkontrolli visiit.
- Rakendus tuletab teie patsientidele automaatselt saadetava e-kirjaga meelde, millal tulla tagasi oma naeratuse järelkontrolliks.
- Igal patsiendil on oma veebikeskkond, kus on andmed ja pildid protseduuride kohta.



Rakendus on tasuta ning teie hambaravikabinet saab lisaväärtust tänu igale BlancOne®-i protseduurile. Tegelikult iga kord, kui teostate protseduuri ja skaneerite rakendusega igas BlancOne®-i komplektis leiduva koodi, te:

- teenite krediiti, et saada oma kabinetile tasuta reklaammaterjale;
- suurendate oma kabineti nähtavust avalikul saidil [blancone.eu](http://blancone.eu);
- suurendate oma patsientide lojaalsust ja seeläbi protseduuride arvu.



\*\*Kõiki BlancOne PRO rakenduse kaudu kogutud andmeid töödeldakse vastavalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) isikuandmete kaitse kohta.



# Saage BlancOne®-i keskuseks

## Tiptasemel hammaste valgendamine

Patsientide jaoks ei tähenda BlancOne® ainult uuenduslikke ja ohutuid raviprotseduure, vaid ka garantiid, et neid teostatakse volitatud keskuses, nagu on sätestatud hammaste valgendamist käsitlevas Euroopa Liidu direktiivis.

BlancOne®-i keskused on hammaste valgendamise protseduuridele spetsialiseerunud hambaravikabinetid, mis on varustatud kõige uuenduslikumate ravimeetodite ja töövahenditega, et tagada igale patsiendile rahuldust pakkuv kogemus.

Lisaks BlancOne® PRO rakendusele on BlancOne®-i keskustel mitmeid eeliseid:

- turundustööriistad, mis aitavad teil valgendamisprotseduure reklaamida;
- spetsiaalne veebikeskkond tööriistadega, mis aitavad teil oma keskust arendada;
- teie patsientidele pühendatud reklaamikampaaniad, lojaalsusprogrammid White for Life ja avatud uste päeva algatused;
- sotsiaalmeediakanalid ja veebisait, millega saate ühenduse luua, et võtta vastu palju uusi patsiente;
- BlancOne®-i volitatud keskuste kaart, mis võimaldab uutel patsientidel teid leida.

Volitatud BlancOne®-i keskusena on teil juurdepääs kõige sobivamatele suhtlusvahenditele, mis aitavad teil valgendamisprotseduure reklaamida.

Tänu BlancOne PRO rakenduse kasutamisele kogutud krediitidele saate tasuta kõiki turundus- ja müügimaterjale.



## Uued patsiendid otsivad teid ...







BlancOne®-i keskuseks saamine on lihtne ja tasuta.

Saate registreeruda kohe professionaalidele mõeldud veebikeskkonnas või alla laadida BlancOne® PRO rakenduse.



# Valgendusprotseduurid

## Tootevalik

		Protseduuri teostamine	Aktiivkomponent	Standardprotokoll	Tulemus	Soovitav sagedus	
<b>HAMBARAVIKABINETIS</b>	Kiire hammaste valgendamine	 CLICK	Hambaravikabinetis, kiire	16% karbamiidperoksiid (HP 5,6%)	1 pealekandmine 10 minutiks*	kuni 4/5 tooni	4-6 korda aastas
		 TOUCH	Hambaravikabinetis	16% karbamiidperoksiid (HP 5,6%)	3 pealekandmist, 8 minutiks*	kuni 6/7 tooni	1-2 korda aastas
	Intensiivne hammaste valgendamine	 ULTRA	Hambaravikabinetis, meditsiiniline	35% vesinikperoksiid	3 pealekandmist, 8 minutiks*	kuni 10 tooni	Üks kord 1-2 aasta jooksul
<b>KODUSEKS KASUTAMISEKS</b>		 HOME DAY	Kodus, päevasel ajal	16% karbamiidperoksiid (HP 5,6%)	2-3 tundi päevas, 1/2 nädalat	1 nädal, kuni 4/5 tooni	1 nädal 2-4 korda aastas
		 HOME NIGHT	Kodus, öösel	10% karbamiidperoksiid (HP 3,5%)	Terve öö, 1/2 nädalat	2 nädalat, kuni 6/7 tooni	2 nädalat 1-2 korda aastas
	Maintenance	 XTRA	Kuni 3 kuud	16% karbamiidperoksiid (HP 5,6%)	Stick: 2 nädalat** Duetto: igapäevaseks kasutamiseks	kuni 1/2 tooni	2/4 korda aastas

\* Valgusega aktiveerimine Arcus valgenduslambiga



[www.blancone.eu/pro](http://www.blancone.eu/pro)  
helpdesk@blancone.eu

 blancone\_ids

 blancone globaalne

 blancone

 blancone team pro (professionaalidele)



Ametlik maaletooja Eestis:

Medshop OÜ

[www.medshop.ee](http://www.medshop.ee)

[info@medshop.ee](mailto:info@medshop.ee)

+372 520 9083



IDS Spa

Via San Cristoforo, 28/10

17100 Savona - Italia

Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865

email: [info@idsdental.it](mailto:info@idsdental.it)

[www.idsdental.it](http://www.idsdental.it)

BlancOne on IDS Spa registreeritud kaubamärk